

physioled 
get ready to win.

onda // ondas de choque.

características

Energía

60÷185 mJ

Modo de trabajo

4 Modos (continua/4/8/12 pulsos)

Frecuencia de trabajo

1÷22hz

Alimentación

90-240 Vac / 50-60 Hz

Potencia maxima absorbida

250 VA

Aplicadores

6/15/25mm

onda.shockwave.

onda es un equipo para la terapia con ondas de choque no focales (radiales) que cambia radicalmente la metodología terapeutica de multiples patologías del sistema muslo-esquelético. La tecnología con ondas de choque consiste en generar una onda acústica caracterizada por un elevado pico de energía regulable en un determinado rango de frecuencia.


Un proyectil acelerado en el mango, a través del impulso electromagnético, genera una onda de presión mecánica que se traslada a la parte interesada irradiando su tejido. La energía mecánica provoca reacciones de bioestimulación en el tejido influyendo positivamente en un vasto rango de condiciones ortopedicas, fisioterapicas y antálgicas.

onda representa el mejor compromiso entre performance y practicidad, erogando hasta 185 mJ MAX (paragonables a más o menos 6 bar del sistema neumático) de energía a frecuencia variable con un diseño de dimensiones contenidas finalizado a la máxima transportabilidad de la unidad. Disminuye también la sensación dolorosa gracias a una mejor distribución de las ondas presorias, permitiendo al operador de obtener mejores respuestas terapéuticas.

La alta intensidad de erogación permite de actuar en las calcificaciones osteotendinee mejorando el proceso biologico de reparación.

Indicaciones Terapéuticas:

- Borsitis
- Coxartrosis
- Epicondilitis/Epitrocleititis
- Dolor de espinillas debidas a fracturas
- Periostritis reactivas
- Rizoartrosis
- Tendinitis y tendinopatias
- Tendoperiostritis

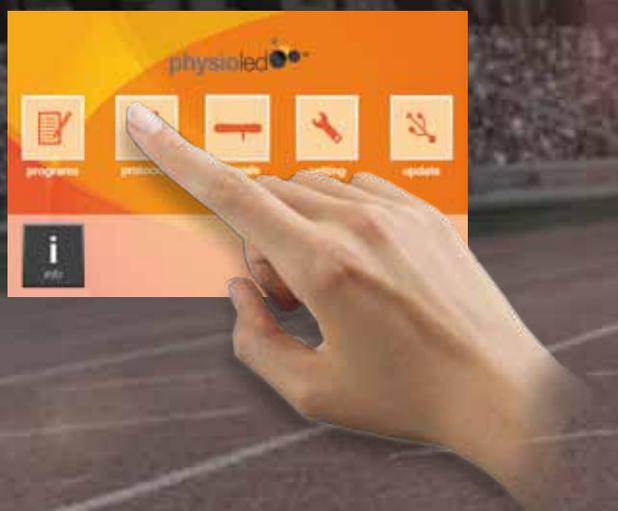


novedades

- Pantalla gráfica táctil
- Posibilidad de actualización a través de USB
- Interfaz a través de iconos intuitivos
- Unidad de control a través de una manopla encoder multifunción, teclas o pantalla táctil
- Amplia gama de protocolos preestablecidos
- Programas acomodables



onda,
*get ready to **win.***

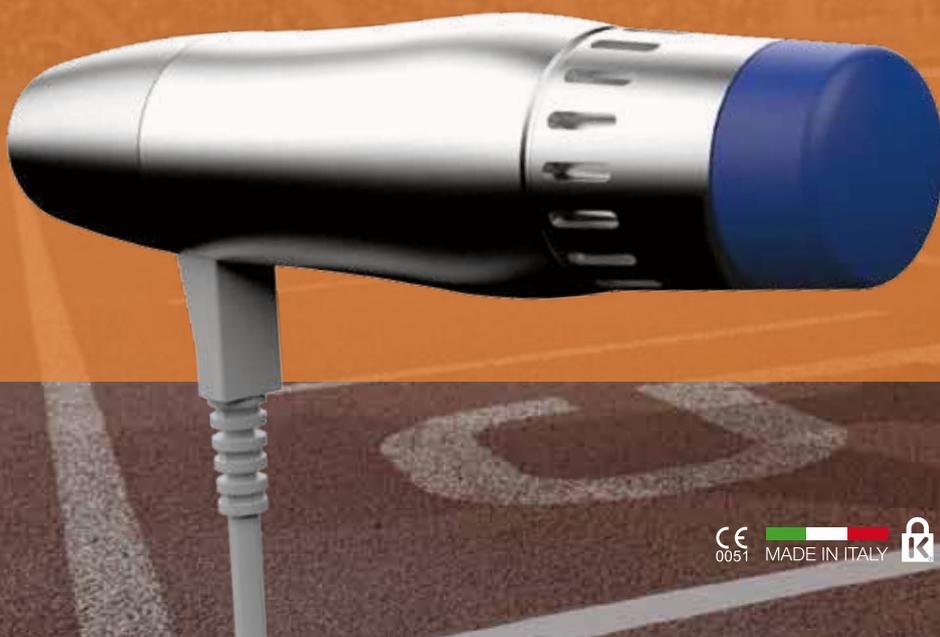

0051 MADE IN ITALY



dimensiones en / base 315 / altura 170 / profundidad 390

Peso / 5 kg



LED SpA

via Selciatella, 40

04011 Aprilia (LT) - Italy

T +39 06 92 87 0045

F +39 06 92 87 0046

www.physioled.com - www.led.it - info@led.it